

BRAÇADEIRA VETERINÁRIA REUTILIZÁVEL 1TUBO (RTI)**REGISTRO MAPA**

Produto isento de registro MAPA de acordo com art. 44 do regulamento aprovado pelo Decreto 5053 de 22/04/2004, IN 37 de 08/09/1999.

PRODUTO EXCLUSIVO PARA USO VETERINÁRIO**DADOS DO PRODUTO**

Nome técnico: BRAÇADEIRA VETERINÁRIA REUTILIZÁVEL

Matéria Prima: Braçadeira: Nylon

Velcro: Poliéster e Nylon

Válvula: TPU

Tubo: PVC

Conectores: Plástico

Produto Estéril: () Sim (x) Não

Validade: INDETERMINADA

DESCRIÇÃO

A braçadeira veterinária reutilizável da Royal Tech Import é confeccionada com componentes de alta qualidade para proporcionar uma aferição da pressão arterial não invasiva fidedigna. Possui na sua constituição 2 conectores diferentes por braçadeira que possibilita o uso em diversos esfigmomanômetros ou monitores multiparamétricos do mercado. Produto isento de látex.

INDICAÇÃO DE USO

As braçadeiras reutilizáveis veterinárias com 1 tubo são indicadas para auxiliar na aferição da pressão arterial não invasiva, por meio do uso de um doppler e esfigmomanômetro ou em conjunto com um monitor multiparamétrico.

INSTRUÇÃO DE USO

- A escolha da braçadeira correta para cada perfil de paciente evita uma aferição não fidedigna, assim evitando um tratamento inadequado.
- Coloque a braçadeira aberta em torno da face interna do membro a ser aferido a pressão.
- Posicione o símbolo de artéria (ARTERY) da braçadeira sobre a artéria presente nos membros anteriores, posteriores ou na cauda do paciente.
- Se a linha indicadora (INDEX LINE) estiver dentro da faixa indicadora da circunferência do membro (ALCANCE), a circunferência da braçadeira está adequada, do contrário selecione outra braçadeira mais apropriada para a circunferência do membro.
- Fixe a braçadeira confortavelmente rente ao paciente. Retire a braçadeira imediatamente após aferir a pressão arterial.


APRESENTAÇÃO COMERCIAL

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
|---------------|--|
| KITBVR | KIT BRAÇADEIRA VETERINÁRIA REUTILIZÁVEL (N.1 AO N.5) 1TUBO (RTI) |
| V0011N | BRAÇADEIRA VETERINÁRIA REUTILIZÁVEL (N.1 - 3-6CM) 1TUBO (RTI) |
| V0012N | BRAÇADEIRA VETERINÁRIA REUTILIZÁVEL (N.2 - 4-8CM) 1TUBO (RTI) |
| V0013N | BRAÇADEIRA VETERINÁRIA REUTILIZÁVEL (N.3 - 6-11CM) 1TUBO (RTI) |
| V0014N | BRAÇADEIRA VETERINÁRIA REUTILIZÁVEL (N.4 - 7-13CM) 1TUBO (RTI) |
| V0015N | BRAÇADEIRA VETERINÁRIA REUTILIZÁVEL (N.5 - 8-15CM) 1TUBO (RTI) |

OBS: POSSUI 1UN DO CONECTOR SL E 1UN DO CONECTOR HP EM CADA BRAÇADEIRA


FOTO:

BRAÇADEIRA N.1

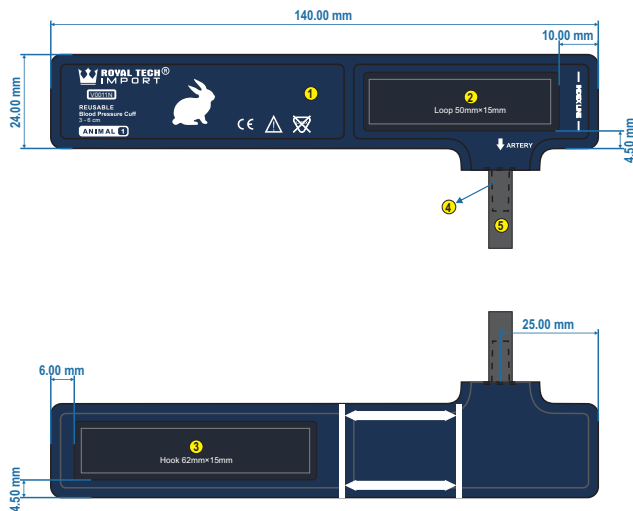


| COD | DESCRIÇÃO |
|-----|--|
| 1 | Tecido composto de nylon azul escuro 70D |
| 2 | Tecido de velcro preto: C=50mm×L=15mm |
| 3 | Gancho de injeção de PVC preto: C=62mm×L=15mm |
| 4 | Válvula tipo bico de TPU transparente: ID = 2,5 mm, OD = 4 mm, H = 11 mm |
| 5 | Tubo de ar de PVC preto: diâmetro interno 3mm, diâmetro externo 6mm, comprimento do tubo 200mm |

BRAÇADEIRA N.2

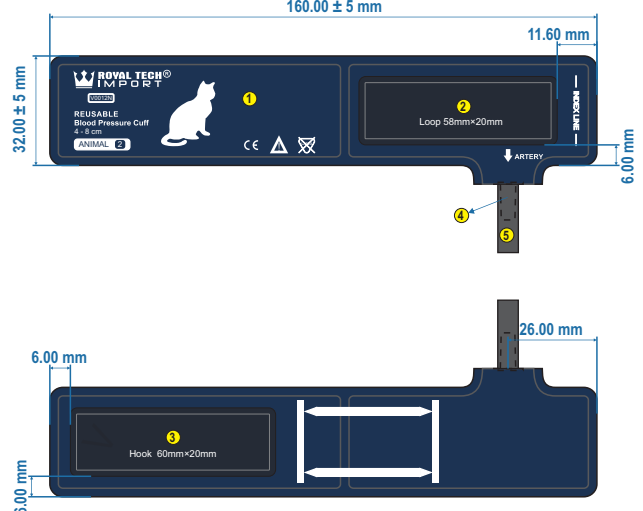


| COD | DESCRIÇÃO |
|-----|--|
| 1 | Tecido composto de nylon azul escuro 70D |
| 2 | Tecido de velcro preto: C=58mm×L=20mm |
| 3 | Gancho de injeção de PVC preto: C=60mm×L=20mm |
| 4 | Válvula tipo bico de TPU transparente: ID = 2,5 mm, OD = 4 mm, H = 11 mm |
| 5 | Tubo de ar de PVC preto: diâmetro interno 3mm, diâmetro externo 6mm, comprimento do tubo 200mm |

BRAÇADEIRA N.3

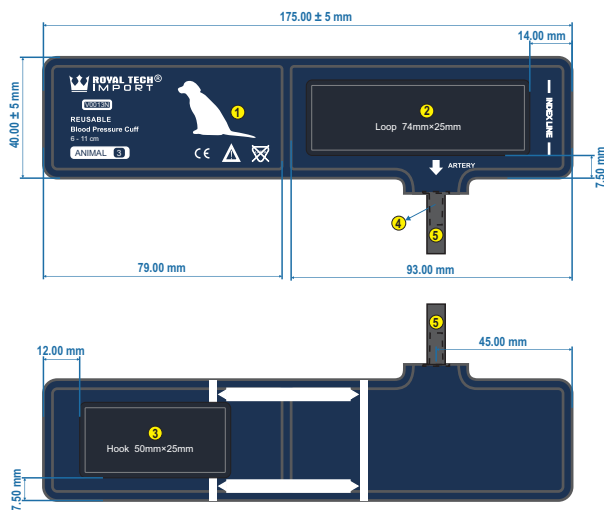


| COD | DESCRIÇÃO |
|-----|--|
| 1 | Tecido composto de nylon azul escuro 70D |
| 2 | Tecido de velcro preto: C=74mm×L=25mm |
| 3 | Gancho de injeção de PVC preto: C=50mm×L=25mm |
| 4 | Válvula tipo bico de TPU transparente: ID = 2,5 mm, OD = 4 mm, H = 11 mm |
| 5 | Tubo de ar de PVC preto: diâmetro interno 3mm, diâmetro externo 6mm, comprimento do tubo 200mm |

BRAÇADEIRA N.4

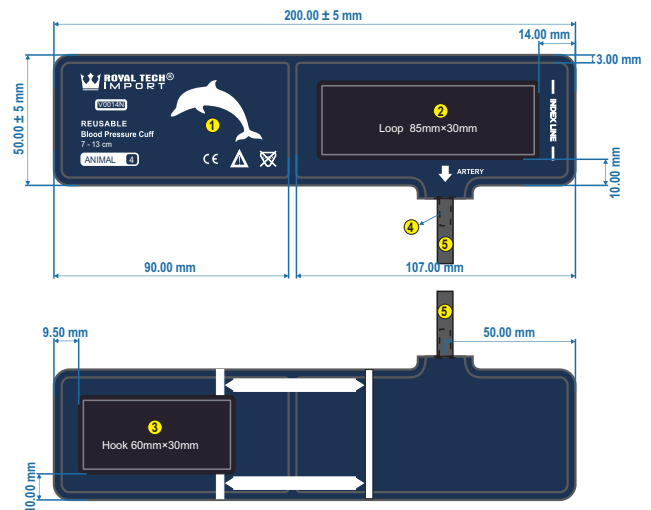

| COD | DESCRIÇÃO |
|-----|--|
| 1 | Tecido composto de nylon azul escuro 70D |
| 2 | Tecido de velcro preto: C=85mm×L=30mm |
| 3 | Gancho de injeção de PVC preto: C=60mm×L=30mm |
| 4 | Válvula tipo bico de TPU transparente: ID = 2,5 mm, OD = 4 mm, H = 11 mm |
| 5 | Tubo de ar de PVC preto: diâmetro interno 3mm, diâmetro externo 6mm, comprimento do tubo 200mm |

BRAÇADEIRA N.5

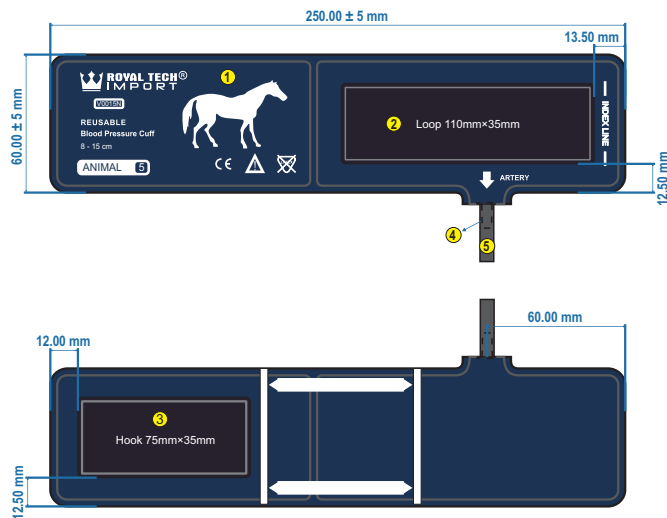

| COD | DESCRIÇÃO |
|-----|---|
| 1 | Tecido composto de nylon azul escuro 70D |
| 2 | Tecido de velcro preto: C=110mm×L=35mm |
| 3 | Gancho de injeção de PVC preto: C=75mm×L=35mm |
| 4 | Válvula tipo bico de TPU transparente: ID = 2,5 mm, OD = 4 mm, H = 11 mm |
| 5 | Tubo de ar de PVC preto: diâmetro interno 3mm, diâmetro externo 6mm, comprimento do tubo 200mm |

CONECTOR SL



CONECTOR HP



COMPOSIÇÃO

- Isento de látex
- Atóxico
- Não Inflamável
- Braçadeira - Nylon
- Velcro - Poliéster e Nylon
- Válvula - TPU
- Tubo - PVC
- Conectores - Plástico

PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES

- Em membros contendo acessos vasculares, ferimentos ou curativos não utilizar para o procedimento de aferição da pressão.
- A insuflação da braçadeira pode bloquear temporariamente a circulação do sangue, o que pode causar lesões ao paciente.
- Não use a braçadeira se houver qualquer sinal de dano do produto. - Não movimentar o membro durante a aferição.
- Escolher com critério o tamanho correto da braçadeira.
- Observar se o tubo de conexão não está comprimido ou dobrado assim evitando a pressurização da braçadeira e possíveis lesões ao paciente.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado em local de boa ventilação, limpo, ao abrigo de luz em temperatura ambiente, umidade inferior a 70%, livre de contaminação e sem nenhum gás corrosivo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO DA EMBALAGEM

Embalagem primária: Saco plástico individual para cada braçadeira.
Embalagem secundária: Caixa de papel cartão.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:**ROYAL TECH DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E VETERINÁRIA - LTDA**

Rua Professor João Soares Barcelos, 2085 - Hauer - Curitiba - PR

E-mail: royaltech.vet.import@gmail.com

Site: www.royaltechimport.com.br

CNPJ: 25.239.410/0001-10

SAC (41) 99740-5140/ 3011-5509

Resp. Téc.: Mv. Nicolas M. Pereira CRMV-PR 11.051